

# S-CUT™

## Ett hjälpmedel vid akutsjukvård och räddning

**S-CUT** är speciellt utvecklat för krävande användning vid akuta räddningsinsatser


**S-CUT** kan användas där det finns behov av att snabbt få av patienten kläderna, skära loss remmar, säkerhetsbälten eller liknande.

**S-CUT** ersätter saxar, sekatorer, knivar och liknande verktyg som kan utgöra en fara för användare såväl som för patienten

Vikt:		0,435 kg
Längd:	239 mm	
Bredd:	24 mm	

Material i rostfritt stål, rödeloxerad aluminium samt värmetålig plast upp till 100 °C. Samtliga delar är lätta att demontera för rengöring eller utbyte. Starka kemikalier kan göra ytan flammig men påverkar ej funktionen.

S-CUT är designskyddad inom EU samt patentsökt i USA

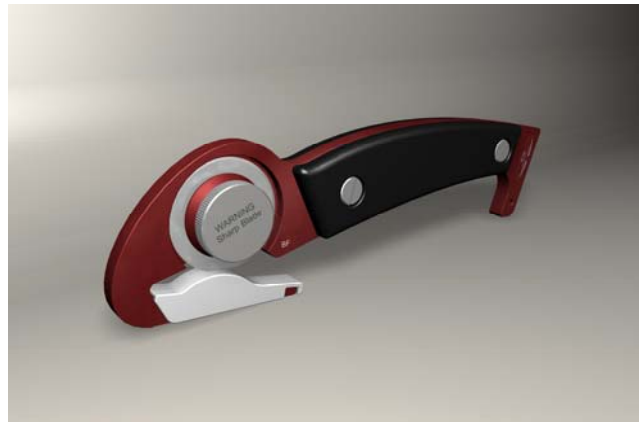

**S-CUT** är handhållet och utformat på ett greppvänligt sätt. Saxens klipprörelser undviks genom att **S-CUT** skär med en dragande rörelse. Denna metod har visat sig både ge ett snabbt omhändertagande samt minska belastning för användaren.

- Skärbladet är inbyggt i verktyget så att man förhindrar skador på både användaren och patienten, ändå är det lätt att byta ut vid behov.

- För att lätt kunna rengöras, består verktyget av ett fåtal delar som är lätta att demontera och montera.

- Förutom vanliga kläder går det utmärkt att skära genom läder, säkerhetsbälten, dragkedjor samt till och med fodrade skinnstall.

S-CUT finns nu representerad på sjukhus, ambulansstationer och räddningstjänst inom Sverige samt hos ett flertal utländska kunder.

ÅTERFÖRSÄLJARE Sjukhus

Gullkragevägen 8  
SE-311 33 Falkenberg

**COMFORT**medical

Mobil: +46(0) 70 314 79 88  
Mobil: +46(0) 70 681 51 41  
Fax: +46(0) 346 151 41  
info@comfortmedical.se  
www.comfortmedical.se